

# インスリンポンプ・持続グルコース測定器は 磁気の影響を受ける可能性があります。 検査前に必ず取り外しをお願いいたします。

## インスリンポンプ

ミニメド  
620G/640G/770G/780G  
インスリンポンプ  
日本メドトロニック(株)



パラダイムインスリンポンプ  
712/722  
日本メドトロニック(株)



メディセーフウィズスマート  
テルモ(株)



TOP-8200  
(株)トップ



## 持続グルコース測定器 (CGM)

ミニメド770G/780Gトランスミッタ  
ガーディアン4トランスミッタ  
日本メドトロニック(株)



Dexcom G6 CGMシステム  
Dexcom G7 CGMシステム  
デクスコムジャパン(合)



FreeStyle リブレ2センサー  
アボットジャパン(合)



## 取り外しが必要なもの

| 療法       | 製品名                                                      | 装着・携帯しているもの | X線   | CT   | MRI  |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
| インスリンポンプ | ミニメド620G/640G/770G/780G インスリンポンプ<br>パラダイムインスリンポンプ712/722 | 注入セット       | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
|          |                                                          | ポンプ本体       | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | メディセーフウィズスマート                                            | 注入セット(パッチ)  | 必要   | 必要   | 必要   |
|          |                                                          | ポンプ         | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | TOP-8200                                                 | 注入セット       | 必要なし | 必要なし | 必要   |
|          |                                                          | ポンプ本体       | 必要   | 必要   | 必要   |
| CGM      | ミニメド770G/780Gトランスミッタ<br>ガーディアン4トランスミッタ                   | トランスミッタ     | 必要   | 必要   | 必要   |
|          |                                                          | センサー        | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | Dexcom G6 CGMシステム<br>Dexcom G7 CGMシステム                   | トランスミッタ     | 必要   | 必要 ※ | 必要   |
|          |                                                          | センサー        | 必要   | 必要 ※ | 必要   |
|          | FreeStyle リブレ2センサー                                       | センサー        | 必要   | 必要   | 必要   |

※Dexcom G7はCTスキャン中にスキャン領域から外され、鉛エプロンで覆われている場合は、取り外しの必要はありません。


各製品の使用方法については各社コールセンターまでお問い合わせください。

|               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本メドトロニック株式会社 | 日本メドトロニック24時間サポートライン TEL:0120-56-32-56 受付時間 24時間365日受付                                                                                                                                                                                     |
| テルモ株式会社       | テルモ・コールセンター TEL:0120-84-1214 インスリンポンプ専用 24時間365日受付                                                                                                                                                                                         |
| デクスコムジャパン合同会社 | テクニカルサポートセンター TEL:0800-000-8019 受付時間【平日】8:00-20:00、【土曜・祝日】8:00-17:00(日曜、祝日が重なる土曜、弊社指定休業日を除く)<br>製品サポートリンク先 <a href="https://dexcom-intl-jp.custhelp.com/app/support_request/">https://dexcom-intl-jp.custhelp.com/app/support_request/</a> |
| 株式会社トップ       | TEL:0120-74-5510 24時間365日受付                                                                                                                                                                                                                |
| アボットジャパン合同会社  | お客様相談窓口:0120-37-8055 受付時間:【月曜～金曜】8:00-20:00、【祝日】8:00-17:00<br>お客様相談窓口メールアドレス(常時受付): <a href="mailto:adc-cs.jp@abbott.com">adc-cs.jp@abbott.com</a>                                                                                         |


# 取り外し方法

## インスリンポンプ


ミニメド620G/640G/770G/780G  
インスリンポンプ  
パラダイムインスリンポンプ712/722

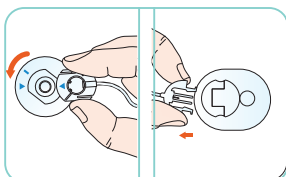

① 注入セットからチューブを取り外します。

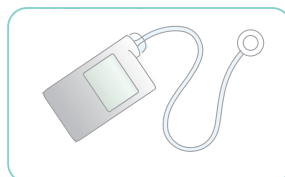


② ポンプとチューブを体から取り外し、清潔な場所に保管します。

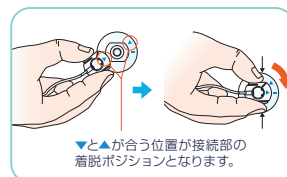


③ 検査後、再びチューブを取り付けます。


メディセーフウィズスマート

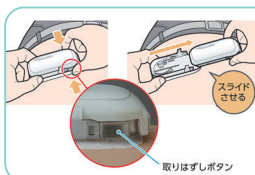

① ポンプをパッチから取り外した後、パッチを体からはがします。

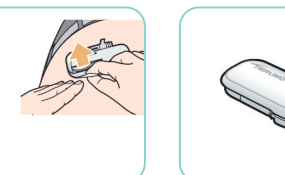


② ポンプを清潔な場所に保管します。

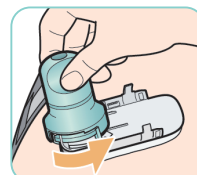


③ 検査後、新しいパッチを取り付けます。


TOP-8200

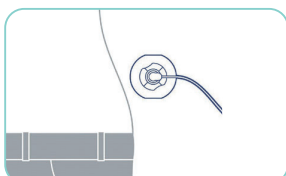

① 注入セットを身体から取り外します。

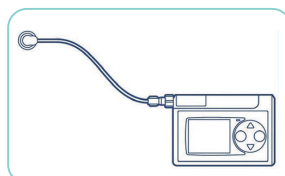


② ポンプを体から取り外し、保管します。

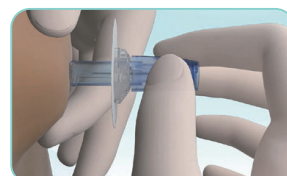


③ 検査後、新しい注入セットを取り付けます。

## 持続グルコース測定器 (CGM)


ミニメド770G/780Gトランスミッタ  
ガーディアン4トランスミッタ

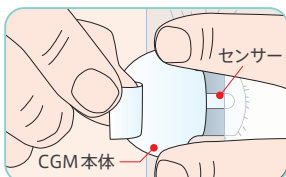

① 粘着タブをCGM本体から慎重に外します。


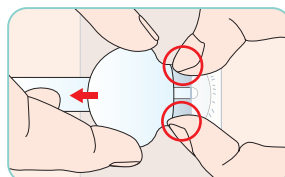


② センサーからCGM本体を取り外した後、センサーをそっとはがします。

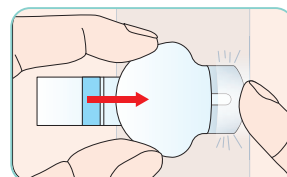

③ 検査後、新しいセンサーを装着し、CGM本体をセンサーに取り付けます。

Dexcom G6 CGMシステム  
Dexcom G7 CGMシステム

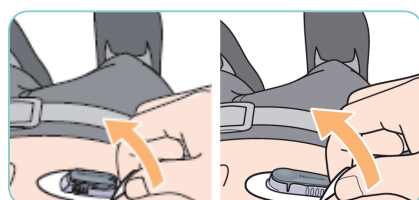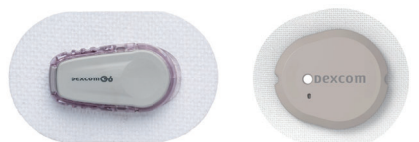

G6: トランスミッターが付いたままの状態、粘着テープを皮膚からはがします。  
G7: 絆創膏のように粘膜パッチをはがします。


FreeStyle リブレ2センサー

【注意】

※ センサーには装着期間中の測定データが保存されています。取り外したセンサーの取り扱いについては、かかりつけの医療機関にご相談ください。  
※ 新しいセンサーの装着についても、かかりつけの医療機関にご相談ください。



① センサーの粘着部の端を引き上げて、一回の動作で皮膚からゆっくりとはがします。

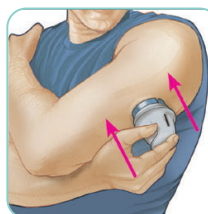

② 検査後、新しいセンサーを装着し、起動します。